


DY-02 血斑干燥仪

DY-02 血斑干燥仪是一款快速干燥血片的设备，可以在避免血卡吹变形的前提下，利用小功率循环风快速干燥血片，缩短时间的同时防止血片受外界污染。

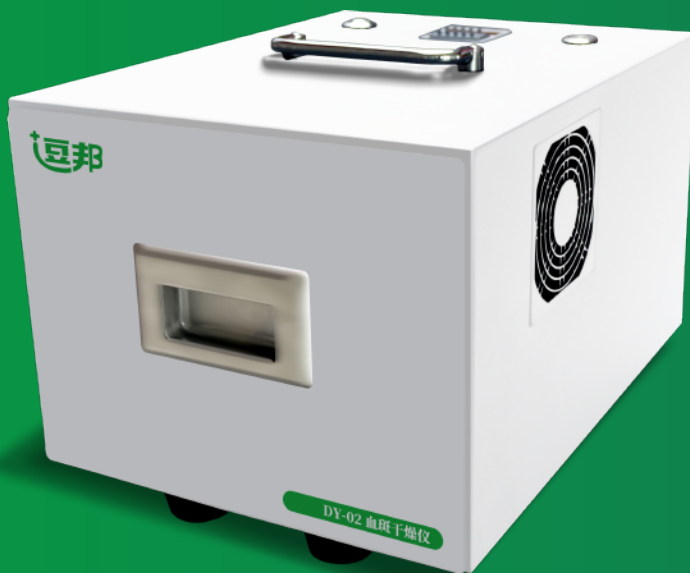

便携：体积小、占用空间少，便于台面摆放。
重量轻、自带提手，便于移动携带。

抗扰：避免因样本叠放造成的交叉污染。
避免外来干扰，如蚊蝇、灰尘污染等。

首创：首创独立封闭的干燥空间。
小功率循环风快速干燥。

高效：短时间内一次性干燥多张样本。
晾干时间从4小时缩短至40分钟。

订购信息：

货号	描述	包装
DY-02	血斑干燥仪	1台/箱
XSB003	新生儿血液收集卡	100张/盒

想要了解更多产品详情
请关注我们或直接访问 www.commashop.cn



逗点商城
逗点生物官方直营

技术参数：

干燥时间	30-40min（湿度 70%）
仪器功能	快速干燥血片、防止污染、缩短干燥时间
最大容量	10 张血卡
计时范围	0-99h99min
支持血卡规格	<75mm*130mm
最大相对湿度	80%（无冷凝）
环境温度	5-35℃
供电电源	AC 220V 50Hz
风量	27.55CFM
功率	20W
外形尺寸	370mm(L)*280mm(W)*243mm(H)
重量	20Kg