



后疫情时代的 健康产品解决方案

呼吸护理

氧疗方案

雾化方案

鼻腔护理方案

消费级健康

逗邦漱口水

逗邦牙线

逗邦湿巾



目录CONTENTS

后疫情时代——蓝海已现·携手扬帆

自 2006 年成立以来，逗点生物持续加大研发和工程投入，逐步构建起以高分子过滤材料、吸附分离材料为核心的技术创新平台与产业化平台，在相关材料领域形成技术突破。深耕生命科学与医疗健康领域近二十载，逗点生物已成为中国多款医疗器材标准起草单位，累计为全球数十亿人次提供核酸采样支持。

步入后疫情时代，人们对呼吸道健康的关注达到前所未有的高度，新冠所带来的呼吸道相关连锁反应也将成为新的社会挑战。同时，随着中国人口老龄化进程加深、国民人均消费水平提高，将进一步推动呼吸护理产业驶入快速发展期，这将是一片巨大的蓝海市场！

洞悉到这一发展前景，逗点生物把目光聚焦到呼吸护理与消费级大健康两大重量级赛道，依托自身全产业链优势和先进制造工艺，着重布局了氧疗、雾化、鼻腔护理、消费级大健康四大产业线，潜力无限。未来，愿与更多有识之士携手扬帆蓝海，共谋发展新篇！



氧疗方案

| | |
|-----------------|----|
| 氧气湿化装置····· | 6 |
| 一次性使用氧气湿化瓶····· | 8 |
| 一次性使用湿化吸氧管····· | 9 |
| 吸氧管品类····· | 10 |
| 氧疗配件····· | 12 |

雾化方案

| | |
|---------------|----|
| 压缩式雾化器····· | 16 |
| 医用雾化器····· | 20 |
| 便携式超声雾化器····· | 22 |

鼻腔护理方案

| | |
|----------------|----|
| 海水鼻腔喷雾器····· | 28 |
| 电动压力喷雾洗鼻器····· | 30 |
| 海水鼻腔清洗液····· | 32 |
| 鼻部冲洗器····· | 34 |
| 专用洗鼻盐····· | 36 |
| 生理性盐水····· | 37 |

消费级健康

| | |
|------------|----|
| 逗邦漱口水····· | 39 |
| 逗邦牙线····· | 40 |
| 逗邦湿巾····· | 41 |





氧疗方案


主要用于患者吸氧时对干燥氧气的湿化，以提高患者的氧疗效果和舒适度，产品为一次性使用，杜绝交叉感染

静音更润氧
源自全产业链把控



氧气湿化装置

从芯出发 静音更润氧

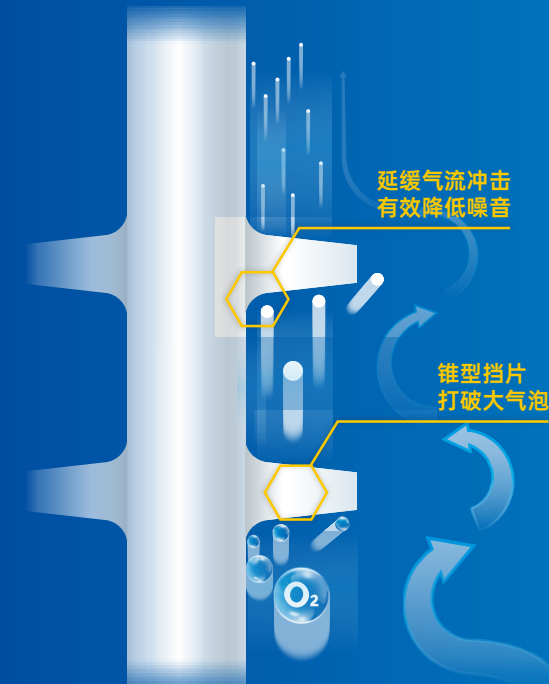

安全吸氧

降噪防溢流

采用防浪堤原理和二级阻隔技术，降噪防溢流。高分子材料无毒、耐高压，吸氧更安全。



无毒环保高分子材料，透明度高，含刻度线，湿化效果可见。



耐高压，瓶体内腔可承受 0.6MPa 压力。



舒适吸氧

高效入水式湿化

16 年滤芯创研经验，独创滤芯设计，使湿化瓶气泡细腻均匀。小的气泡噪音低，湿化效率更高。

灵活吸氧

规格齐全

产品规格型号多样，满足临床个性化需求。

简单吸氧

一步连接

快插接口，一步连接，安全防脱。

一次性使用氧气湿化瓶

粤械注准 20222081390

产品由瓶体、瓶盖、湿化滤芯组件以及湿化液组成

主要特点

- 

1. 无菌提供
- 

2. 瓶体透明材质，湿化看得见
- 

3. 高压防爆设计，耐压抗裂
- 

4. 通用螺纹口，适配多数流量计

| 货号 | 物料名称 | 规格型号 | 套装规格 | 物料描述 |
|--------|------------|-------|----------|---------------------------------|
| RH0-06 | 一次性使用氧气湿化瓶 | 200ml | 30 套 / 箱 | 湿化液装量为 200ml，灭菌级 |
| RH0-12 | 一次性使用氧气湿化瓶 | 200ml | 30 套 / 箱 | 湿化液装量为 200ml，灭菌级，赠配儿童双孔鼻氧管 2.0m |
| RH0-13 | 一次性使用氧气湿化瓶 | 80ml | 30 套 / 箱 | 湿化液装量为 80ml，灭菌级，赠配成人双孔鼻氧管 2.0m |
| RH0-14 | 一次性使用氧气湿化瓶 | 100ml | 30 套 / 箱 | 湿化液装量为 100ml，灭菌级，赠配成人双孔鼻氧管 2.0m |
| RH0-15 | 一次性使用氧气湿化瓶 | 120ml | 30 套 / 箱 | 湿化液装量为 120ml，灭菌级，赠配成人双孔鼻氧管 2.0m |
| RH0-16 | 一次性使用氧气湿化瓶 | 150ml | 30 套 / 箱 | 湿化液装量为 150ml，灭菌级，赠配成人双孔鼻氧管 2.0m |
| RH0-17 | 一次性使用氧气湿化瓶 | 180ml | 30 套 / 箱 | 湿化液装量为 180ml，灭菌级，赠配成人双孔鼻氧管 2.0m |
| RH0-18 | 一次性使用氧气湿化瓶 | 200ml | 30 套 / 箱 | 湿化液装量为 200ml，灭菌级，赠配成人双孔鼻氧管 2.0m |

更多产品信息，请与我司联系



一次性使用湿化吸氧管

产品由瓶体、瓶盖、湿化滤芯组件以及湿化液组成

主要特点

- 

1. 规格多样，满足临床个性化需求
- 

2. 含纸塑包装吸氧管，EO 解析更彻底
- 

3. 快插接头，一步连接、自由旋转，吸氧更灵活

| 一次性使用湿化吸氧管 | | | |
|------------|-------|------|---|
| 型 号 | 湿化瓶 | | 吸氧管 |
| | 规格 | 灭菌级别 | 型号规格 |
| RH1 RH2 | 80mL | 非无菌 | 成人 / 儿童 / 双孔（2.5 m / 2 m / 1.5 m）、 成人面罩（2m）、儿童面罩（2m） |
| | 100mL | | |
| | 120mL | | |
| | 150mL | | |
| | 180mL | | |
| | 200mL | | |
| | 250mL | | |



吸氧管品类

本产品需与输氧系统连接，用于人体吸入氧气。由氧源接头、输氧管、双孔鼻塞或面罩、耳挂固定（可选配）组成，产品以非无菌和无菌两种形式提供，无菌款产品经环氧乙烷灭菌。

| | |
|------------|------------------|
| 一次性无菌鼻塞吸氧管 | 粤械注准 20182080995 |
| 鼻氧管 | 粤惠械备 20220127 |
| 一次性使用鼻氧管 | 注册中 |
| 一次性使用吸氧面罩 | 开发中 |



主要特点

1. 医用级高分子材料制成，安全无毒
2. 管内六棱结构设计，防扭曲弯折，吸氧通畅
3. 纸塑袋包装，环氧乙烷解析更彻底吸氧更灵活

| 货号 | 物料名称 | 规格型号 | 套装规格 | 物料描述 |
|--------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------|
| R221-1 | 一次无菌鼻塞吸氧管 | 成人双孔 2.0m | 300 根 / 箱 | 长 2.0 米，包装尺寸 16×23cm，纸塑袋包装，环氧乙烷灭菌 |
| R222-1 | 一次无菌鼻塞吸氧管 | 儿童双孔 2.0m | 300 根 / 箱 | 长度 2.0 米，包装尺寸 16×23cm，纸塑袋包装，环氧乙烷灭菌 |

更多产品信息，请与我司联系



氧疗配件



产品介绍

- 1、供氧系统用流量计：**用于急救给氧或对缺氧患者进行氧气吸入使用，对氧气具有调节和指示流量功能，是医用中心供氧系统的必备器械。雾湿两用流量计氧疗时可连接湿化瓶进行氧气湿化，雾化时可与雾化杯一同使用，方便简单，一机两用。
- 2、快插转接头：**用于快插湿化瓶与流量计连接配件。



| | | | |
|----|------------------|-----------------|---------------|
| 货号 | P26011 | P26001/P26001-1 | P26010~P26022 |
| 名称 | 通用型流量计 | 雾湿两用流量计 | 快插转接头 |
| 规格 | M30×2（国标 / 德标接头） | M30×2（国标接头） | / |



雾化方案

将液体药物雾化，供患者吸入

专业医疗级
自由呼吸 美好生活



压缩式雾化器

粤械注准 20212080198


通过压缩气体产生的气流雾化药物并将其输送到呼吸道，供呼吸道雾化药物吸入治疗用。可搭配 R124 医用雾化器或其他医用雾化器使用，可广泛应用于医疗机构和家庭场所，既可用于医院雾化室，也可以用于居家雾化。



RN21

压缩式雾化器

超静音雾化院线高端款

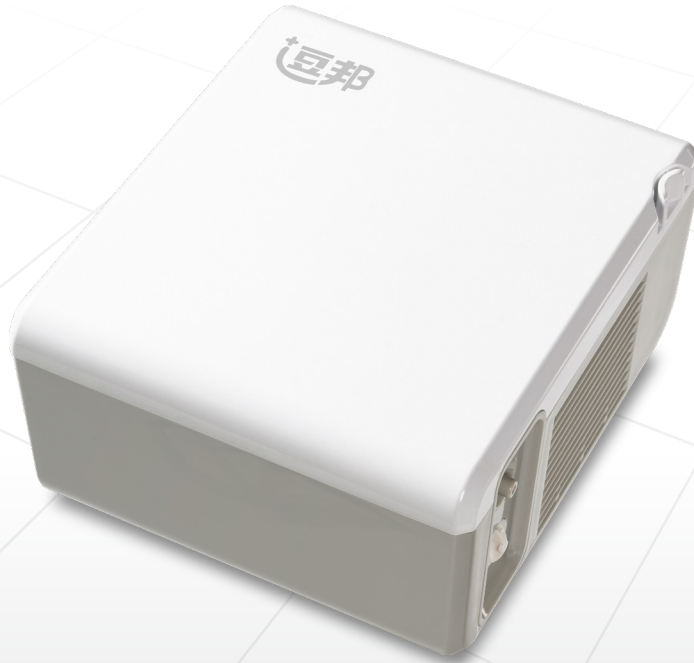

主要特点

- 超静音技术，静享舒适雾化：豪华静音无油压缩机运行噪音 ≤54dB（A 计权），雾化环境依从性更高
- 出雾细腻，吸收效果好：医用级雾粒中位粒径 3.00μm±25%，1μm~5μm 雾粒度分布 >80%，直达下呼吸道
- 安全耐用抗耗损：静音无油压缩机，无有毒气体产生，运行时长达 2000h，并内置控温保护装置
- 出雾速率高，雾化更高效：强劲电机，动力澎湃，出雾效率 ≥0.2ml/min
- 操作便捷，使用无忧：一键启动，一台机器，全家适用

产品主要参数

| | | | |
|----------|------------------------|--------|----------------------------|
| 防电击类型分类 | Ⅱ 类 | 电源要求 | 220V±10%/50Hz |
| 防电击程度分类 | BF 应用型 | 额定功率 | 180VA |
| 防水等级 | IPX0 | 熔断器 | 250V/2A |
| 产品尺寸 | 200×166×106mm | 重量 | 2.18Kg |
| 工作流量 | >4L/min | 工作气压 | 60kpa-160kpa |
| 极限压力 | 207kpa ~ 380kpa | 雾化率 | ≥ 0.20g/min |
| 噪音值 | ≤ 65dB(A 计权) | 残液量 | ≤ 1.0g |
| 等效体积粒径分布 | 直径小于 5μm 的雾粒所占比例大于 60% | 连续工作时间 | 雾化器在常温下，采用交流电源供电，持续工作 4 小时 |
| 热熔断器工作温度 | 135℃ | / | / |

| 货号 | 产品名称 | 规格型号 | 套装规格 | 物料描述 |
|----------|--------|------|---------|---------------------------------------|
| RN21-001 | 压缩式雾化器 | RN21 | 1 台 / 盒 | 雾化主机 1 台、原厂配件包 1 包、说明书 1 份、过滤棉或滤芯 1 包 |
| RN21-002 | 压缩式雾化器 | RN21 | 1 台 / 盒 | 雾化主机 1 台、原厂配件包 1 包、说明书 1 份、过滤棉或滤芯 1 包 |
| RN21-003 | 压缩式雾化器 | RN21 | 1 台 / 盒 | 雾化主机 1 台、原厂配件包 1 包、说明书 1 份、过滤棉或滤芯 1 包 |

更多产品信息，请与我司联系

RN22

压缩式雾化器

基层医疗机构（社康 / 诊所等）
雾化优选款



主要特点

- 出雾细腻易吸收：医用级雾粒中位粒径 3.00μm±25%，1μm~5μm 雾粒度分布 >70%，可直达下呼吸道
- 出雾效率高，雾化更高效：内置电机动力强劲，出雾效率 ≥0.2ml/min
- 操作便捷，使用无忧：机身自带一体式收纳盒，配件完整取用无忧
- 收纳一体嵌入式设计，收纳从容有度：自带收纳功能，可收纳药杯、面罩、咬嘴、导气管等
- 操作简单，使用无忧：一键启动，一台机器，全家适用

产品主要参数

| | | | |
|-----------|------------------------|--------|----------------------------|
| 防电击类型分类 | Ⅱ类 | 电源要求 | 220V±10%/50Hz |
| 防电击程度分类 | BF 应用型 | 额定功率 | 180VA |
| 防水等级 | IPXO | 熔断器 | 250V/2A |
| 产品尺寸 | 294×170×102mm | 重量 | 1.6Kg |
| 工作流量 | >4L/min | 工作气压 | 60kpa-160kpa |
| 极限压力 | 207kpa ~ 380kpa | 雾化率 | ≥ 0.20g/min |
| 噪音值 | ≤ 65dB(A 计权) | 残液量 | ≤ 1.0g |
| 等效体积粒径分布 | 直径小于 5μm 的雾粒所占比例大于 60% | 连续工作时间 | 雾化器在常温下，采用交流电源供电，持续工作 4 小时 |
| 热熔断路器工作温度 | 135℃ | / | / |

| 货号 | 物料名称 | 规格型号 | 套装规格 | 物料描述 |
|----------|--------|------|--------|-----------------------------------|
| RN22-001 | 压缩式雾化器 | RN22 | 1台 / 盒 | 雾化主机 1台、原厂配件包 1包、说明书 1份、过滤棉或滤芯 1包 |
| RN22-002 | 压缩式雾化器 | RN22 | 1台 / 盒 | 雾化主机 1台、原厂配件包 1包、说明书 1份、过滤棉或滤芯 1包 |
| RN22-003 | 压缩式雾化器 | RN22 | 1台 / 盒 | 雾化主机 1台、原厂配件包 1包、说明书 1份、过滤棉或滤芯 1包 |

更多产品信息，请与我司联系

RN23

压缩式雾化器

雾化便携款



主要特点

- 小巧便捷 :1.2kg 轻量机身，匠心设计简约而不简单
- 出雾细腻易吸收：医用级雾粒中位粒径 3.00μm±25%，1μm~5μm 雾粒度分布占比>70%，可直达下呼吸道
- 出雾效率高，雾化更高效：内置电机动力强劲，出雾效率 ≥0.2ml/min
- 操作简单，使用无忧：一键启动，一台机器，全家适用

产品主要参数

| | | | |
|-----------|------------------------|--------|----------------------------|
| 防电击类型分类 | Ⅱ类 | 电源要求 | 220V±10%/50Hz |
| 防电击程度分类 | BF 应用型 | 额定功率 | 180VA |
| 防水等级 | IPXO | 熔断器 | 250V/2A |
| 产品尺寸 | 196×160×98mm | 重量 | 1.2Kg |
| 工作流量 | >4L/min | 工作气压 | 60kpa-160kpa |
| 极限压力 | 207kpa ~ 380kpa | 雾化率 | ≥ 0.20g/min |
| 噪音值 | ≤ 65dB(A 计权) | 残液量 | ≤ 1.0g |
| 等效体积粒径分布 | 直径小于 5μm 的雾粒所占比例大于 60% | 连续工作时间 | 雾化器在常温下，采用交流电源供电，持续工作 4 小时 |
| 热熔断路器工作温度 | 135℃ | / | / |

| 货号 | 物料名称 | 规格型号 | 套装规格 | 物料描述 |
|----------|--------|------|--------|-----------------------------------|
| RN23-001 | 压缩式雾化器 | RN23 | 1台 / 盒 | 雾化主机 1台、原厂配件包 1包、说明书 1份、过滤棉或滤芯 1包 |
| RN23-002 | 压缩式雾化器 | RN23 | 1台 / 盒 | 雾化主机 1台、原厂配件包 1包、说明书 1份、过滤棉或滤芯 1包 |
| RN23-003 | 压缩式雾化器 | RN23 | 1台 / 盒 | 雾化主机 1台、原厂配件包 1包、说明书 1份、过滤棉或滤芯 1包 |

更多产品信息，请与我司联系



| R121 雾化杯 | R122 雾化杯 | R123 雾化杯 | R124 雾化杯 |
|---|---|---|---|
| 橙色基础款 | 低流量 / 残液橙色明星款 | 紫杯经济款 | 蓝杯院线款 |
| 1. 医用级微米雾化粒径及雾粒分布，8ml 小容量装液 2. 雾化杯独特的侧出设计优于传统的直出喷雾，倾斜 45 度药液无溢出 | 1. 国内首创低流量、药液低残留专利技术应用，雾化充分，利用率高 2. 兼容市场交 / 直流压缩式雾化机，雾化多一种选择 | 1. 优异的医用级微米雾化粒径及雾粒分布，12ml 大容量装液 2. 个性化设计，躺卧、半坐卧或坐立姿势均可完全喷雾 | 1. 最优的医用微米级雾化粒径及雾粒分布，12ml 大容量装液 2. 个性化设计，躺卧、半坐卧或坐立姿势均可完全喷雾 |
|  |  |  |  |

| 产品名称 | R121 雾化杯 | R122 雾化杯 | R123 雾化杯 | R124 雾化杯 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 分类 | 含儿童面罩式 含成人面罩式 | 含儿童面罩式 含成人面罩式 | 含儿童面罩式 含成人面罩式 | 含儿童面罩式 含成人面罩式 |
| 灭菌类型 | 灭菌款 / 普通款 | 灭菌款 / 普通款 | 灭菌款 / 普通款 | 灭菌款 / 普通款 |
| 雾化杯颜色 | 橙色 | 橙色 | 紫色 | 蓝色 |
| 中位粒径 | 3.12μm | 2.45μm | 2.8μm | 2.65μm |
| 1μm~5μm 雾粒分布 | 73.34% | 82.0% | 80.0% | 83.21% |
| 残液量 | 0.82ml | 0.52ml | 0.86ml | 0.76ml |
| 容 量 | 8ml | 8ml | 12ml | 12ml |
| 雾化率 | ≥0.35ml/min | ≥0.45ml/min | ≥0.31ml/min | ≥0.31ml/min |
| 有效期 | 3 年 | 3 年 | 3 年 | 3 年 |
| 装箱数 | 50pcs/ 箱 | 50pcs/ 箱 | 50pcs/ 箱 | 50pcs/ 箱 |
| 注：以上数据（雾化率、中位粒径、1μm~5μm 雾粒分布、残液量）源于豆邦呼吸实验室测试 | | | | |

| 货号 | 产品名称 | 规格型号 | 套装规格 | 物料描述 |
|----------|-------|------|------|---|
| R121-001 | 医用雾化器 | RN22 | 包 | 橙色杯 1 个、儿童面罩 1 个、咬嘴 1 个、灰色松紧带 1 条、1.5m 导气管 |
| R121-002 | 医用雾化器 | RN22 | 包 | 橙色杯 1 个、成人面罩 1 个、咬嘴 1 个、灰色松紧带 1 条、1.5m 导气管 |
| R122-001 | 医用雾化器 | R122 | 包 | 橙色低流量杯 1 个、儿童面罩 1 个、咬嘴 1 个、灰色松紧带 1 条、1.5m 导气管 |
| R122-002 | 医用雾化器 | R122 | 包 | 橙色低流量杯 1 个、成人面罩 1 个、咬嘴 1 个、灰色松紧带 1 条、1.5m 导气管 |
| R123-001 | 医用雾化器 | R123 | 包 | 紫色杯 1 个、儿童面罩 1 个、咬嘴 1 个、灰色松紧带 1 条、1.5m 导气管 |
| R123-002 | 医用雾化器 | R123 | 包 | 紫色杯 1 个、成人面罩 1 个、咬嘴 1 个、灰色松紧带 1 条、1.5m 导气管 |
| R124-001 | 医用雾化器 | R124 | 包 | 蓝色杯 1 个、儿童面罩 1 个、咬嘴 1 个、灰色松紧带 1 条、1.5m 导气管 |
| R124-002 | 医用雾化器 | R124 | 包 | 蓝色杯 1 个、成人面罩 1 个、咬嘴 1 个、灰色松紧带 1 条、1.5m 导气管 |

便携式超声雾化器

本雾化器的工作原理是在电路的快速振荡驱动下，使得压电陶瓷换能片进行谐振振荡，从而带动微孔网片快速振荡，使药液通过网片上微小网孔并被快速弹出，形成无数的微小雾化颗粒，经吸入面罩或吸嘴引导至患者呼吸系统，以达到吸入治疗的目的。

粤械注准 20182230494



粤械注准 20172080713



RN24

便携式超声雾化器

儿童手持智能雾化时尚款



主要特点

- 静音雾化，安享舒适雾化不闹心：新一代网式雾化技术，低噪音运行 ≤50dB（A 计权）
- 智能防呛，雾量按需可调：智能适应呼吸频率的浪涌雾化专利技术和手动变频雾化技术，雾化从此多一种选择
- 微米级雾化，直达下呼吸道：雾粒中位粒径 3.0μm±25%，1μm~5μm 雾粒度分布 >50%，出雾细腻柔和
- 小巧轻便，随身携带：符合人体工程学的 102g 轻量设计，单手可握，口袋容纳无忧
- 一键雾化，操作至简：轻触按键即可启动

产品主要参数

| | |
|-----------|----------------------------------|
| 使用电源 | 内部电源 |
| 雾化率 | 0.15ml/min~0.90ml/min |
| 雾化器工作频率 | 130kHz ± 10% |
| 雾粒中位粒径 | 3.0μm ± 25% |
| 等效体积粒径分布 | 1μm~5μm 的雾粒所占比例大于 50% |
| 水槽内水温 | ≤60℃ |
| 药液杯容量 | 8ml |
| 整机噪声 | ≤50dB(A 计权) |
| 外形尺寸 / 重量 | 长 47mm x 宽 68mm x 高 99mm/ 约 102g |
| 其他内容详见说明书 | |

| 货号 | 产品名称 | 物料描述 | 套装规格 |
|---------|----------|---|---------------------|
| RN24-01 | 便捷式超声雾化器 | 礼盒装便捷式超声雾化器雾化器，含雾化主机、药液杯组件、吸入面罩 L1（成人）、吸入面罩 S1（儿童）、吸嘴 M1、USB 数据线等 | 1 个 / 盒 30 盒 / 箱 |

更多产品信息，请与我司联系

RN25

便携式超声雾化器

儿童便携雾化经济款



主要特点

- 静音雾化，安享舒适雾化不闹心：新一代网式雾化技术，低噪音运行 ≤50dB（A 计权）
- 微米级雾化，直达下呼吸道：雾粒中位粒径 3.0μm±25%，1μm~5μm 雾粒度分布 >50%，出雾细腻柔和
- 轻巧便携，随身携带：119g 轻量机身，单手可握，可口袋式容纳，随时随地雾化
- 一键雾化，操作至简：轻触按键即可启动

产品主要参数

| | |
|-----------|------------------------------------|
| 使用电源 | 内部电源 |
| 雾化率 | 0.25ml/min~0.90ml/min |
| 雾化器工作频率 | 130kHz ± 10% |
| 雾粒中位粒径 | 3.0μm ± 25% |
| 等效体积粒径分布 | 1μm~5μm 的雾粒所占比例大于 50% |
| 水槽内水温 | ≤45℃ |
| 药液杯容量 | 10ml |
| 整机噪声 | ≤50dB(A 计权) |
| 外形尺寸 / 重量 | 长 38.3mm x 宽 38.3mm x 高 109mm/119g |
| 其他内容详见说明书 | |

| 货号 | 产品名称 | 物料描述 | 套装规格 |
|---------|----------|---|---------------------|
| RN25-01 | 便捷式超声雾化器 | 礼盒装便捷式超声雾化器雾化器，含雾化主机、药液杯组件、吸入面罩 L1（成人）、吸入面罩 S1（儿童）、吸嘴 M1、USB 数据线等 | 1 个 / 盒 30 盒 / 箱 |

更多产品信息，请与我司联系



鼻腔护理方案

生理性盐水成分的渗透压跟人体接近，可以温和地对鼻腔进行灌洗，将过敏原、病菌、炎性分泌物等脏东西排出体外，恢复鼻腔自身的洁净功能。目前盐水洗鼻对鼻腔护理起到的积极作用已经得到了医学界广泛的认可。

敞开呼吸
悦享时光



R423

不含防腐剂

海水鼻腔喷雾器

粤械注准 20212140619

用于急慢性鼻炎、过敏性鼻炎、鼻息肉、鼻窦炎等鼻腔疾病患者的鼻腔清洗，也用于鼻炎手术后及化疗后的鼻腔清洗

不含防腐剂、成分仅有天然海水和纯化水

中华白海豚栖息地水源，新鲜纯净海水 24 小时灌装



主要特点



缓解鼻干

起到保湿作用，缓和鼻腔内水分平衡，湿润鼻腔



鼻腔清洗

有效清除鼻腔病菌、过敏源、炎性分泌物及外源性颗粒等



预防不适

保持鼻腔内湿润以及良好环境，温和不刺激



适用人群

中老年人、孕妇、婴幼儿、青年、均可使用

临床适应症

耳鼻喉科：

- 各种鼻炎、鼻窦炎、鼻腔干燥患者
- 过敏性 鼻炎患者清洗鼻粘膜附着过敏原，减轻过敏反应。

儿科：

- 各种鼻炎、鼻窦炎、鼻腔干燥患者
- 过敏性 鼻炎患者清洗鼻粘膜附着过敏原，减轻过敏反应

内科：

- 迅速缓解上呼吸道感染症状，预防哮喘发作。

肿瘤科：

- 肿瘤科、鼻咽癌放疗中消除黏膜水肿消除痂皮，预防分泌性中耳炎及鼻窦炎发生。



(毫米级喷雾均匀喷洒)
单向阀门设计
防止回流，有保障无污染

| 货号 | 产品名称 | 物料描述 | 套装规格 |
|------|---------|---------------|-------------------|
| R423 | 海水鼻腔喷雾器 | 0.9% 海水盐度，儿童型 | 1瓶 / 盒 60盒 / 箱 |

RC21

不呛鼻更干净，自带回收池

电动压力喷雾洗鼻器

粤械注准 20222140167
适用于冲洗和清洁鼻腔

超低分贝，静音效果，孩子不抗拒
超轻柔雾化效果



主要特点

1. 三档冲洗，适用于不同的使用场景
- 2.Type-C 接口充电方便
3. 分仓隔离设计，使用方便又卫生
4. 低噪音运行，宝宝不抗拒

| | |
|-----------|---|
| 产品名称 | 电动压力喷雾洗鼻器 |
| 产品型号 | Air Flow 2 |
| 使用电源 | 内部电源 |
| 水箱容量 | 25mL |
| 低挡流量速率 | 7ml/min (误差± 3ml/min) |
| 高档流量速率 | 10ml/min (误差± 3ml/min) |
| 低频脉冲流量速 | 5ml/min (误差± 3ml/min) |
| 高频脉冲流量速率 | 5ml/min (误差± 3ml/min) |
| 连续工作时间 | > 30min |
| 整机噪声 | < 80dB(A) |
| 工作方式 | 连续运行 |
| 产品尺寸 / 重量 | 长 63mm x 宽 50mm x 高 175mm/ 约 185g (含电池) |

| 货号 | 产品名称 | 物料描述 | 套装规格 |
|---------|-----------|---------------------|-------------------|
| RC21-01 | 电动压力喷雾洗鼻器 | 高端礼盒包装，Air Flow 2 型 | 1个 / 盒 40盒 / 箱 |

R431

更多矿物质更好修复

海水鼻腔清洗液

粤械注准 20182140755

用于急慢性鼻炎、过敏性鼻炎，鼻息肉、鼻窦炎等鼻腔疾病患者的鼻腔清洗，也用于鼻炎手术后及化疗后的鼻腔清洗。

无菌独立包装，小瓶携带方便，一瓶多用。温和洗鼻，可配合雾化使用。

采用死海亚拉巴海盐调配而成，含有极为丰富的海洋矿物质，冲洗鼻腔的同时可以很好的促进细胞新陈代谢，还您一个舒畅的清新世界



主要特点

- 进口海盐天然萃取**
天然 0 污染的以色列亚拉巴海盐，难得的天然盐资源
- 富含珍稀微量矿物质元素**
丰富的氯化镁、钠、钾、钙、溴等高达 21 种珍稀有益的矿物质元素
- 渗透皮肤深层清洁**
死海矿物质能够提升皮肤水分和透气性，使营养能够渗透至皮肤深层
- 适用人群**
中老年人、孕妇、婴幼儿、青年、均可使用

| 货号 | 产品名称 | 物料描述 | 套装规格 |
|---------|---------|--|----------------------|
| R431-01 | 海水鼻腔清洗液 | 氯化钠浓度 0.9%，亚拉巴海盐；I 型，5ml 塑料 A 瓶装。 5ml/ 支，28 支 / 盒 | 28 支 / 盒 60 盒 / 箱 |



R411

随心把控不呛鼻

鼻部冲洗器

医疗器械备案号：
粤惠械备 20220088

简易操作带来超通畅冲鼻体验



材质安全，
抗挤压防破裂



水速可控，
温和不呛鼻

| 货号 | 产品名称 | 描述 | 套装规格 |
|---------|-------|----------------------------|------|
| R411-01 | 鼻部冲洗器 | PP 材质，配备成人、儿童两个喷嘴，250ml 容量 | 1个/盒 |
| R411-02 | 鼻部冲洗器 | PP 材质，配备成人、儿童两个喷嘴，500ml 容量 | 1个/盒 |



R44

不含碘

专用洗鼻盐

本产品用于日常鼻腔保健清洗与护理

精选无碘盐，原料符合《药典》医用级氯化钠标准，独立密封包装，易溶于水，安全温和无刺激

| 货号 | 产品名称 | 描述 | 套装规格 |
|--------|-------|-------------------|----------|
| R44-01 | 专用洗鼻盐 | 白色结晶状 2.25g/ 包 | 30 包 / 盒 |



R451

不含碘

生理性盐水

本产品用于日常鼻腔、皮肤清洗与护理
也可作为雾化液使用

原料符合《药典》医用级氯化钠以及注射用水标准，无菌包装，一次一管，安全温和无刺激；

| 货号 | 产品名称 | 描述 | 套装规格 |
|---------|-------|-------------------------|----------|
| R451-01 | 生理性盐水 | 0.9% 氯化钠 溶液， 5ml/ 支 | 20 支 / 盒 |
| R451-02 | 生理性盐水 | 0.9% 氯化钠 溶液， 20ml/ 支 | 20 支 / 盒 |



消费级健康

涵盖口腔健康和个人护理两大家庭消费大健康领域。口腔健康系列的漱口水和牙线可辅助刷牙进行全口腔健康护理；个人护理系列的湿巾用于皮肤，物体表面清洁杀菌。

逗邦漱口水

医用到家用，呵护您的口腔健康

针对不同口腔状态人群，多种口味可供选择，总有一款适合您。
源头实力工厂，支持 OEM/ODM，可为您提供专业的品牌解决方案。

| 货号 | 产品名称 | 描述 | 套装规格 |
|---------------|------------|-----------------------------|----------------------|
| SKST-A002-240 | 海洋薄荷便携漱口水 | 氟化钠，薄荷提取物 (推荐防蛀需求的用户) | 20 条 / 盒 30 盒 / 箱 |
| SKST-A004-240 | 满纷桃气便携漱口水 | 鲜桃提取物，副干酪乳杆菌 (适合口干舌燥用户) | 20 条 / 盒 30 盒 / 箱 |
| SKST-A006-240 | 青柠莫吉托便携漱口水 | 含酒精，青柠檬提取物 (适合追求刺激口感的用户) | 20 条 / 盒 30 盒 / 箱 |
| SKST-A008-240 | 阳光西柚便携漱口水 | 精氨酸，西柚提取物 (适合口腔敏感的用户) | 20 条 / 盒 30 盒 / 箱 |
| SKST-A010-240 | 雨前龙井便携漱口水 | 绿茶，大蠟提取物 (适合口腔有损伤的用户) | 20 条 / 盒 30 盒 / 箱 |
| SKST-A012-240 | 清爽薄荷便携漱口水 | 氟化钠，薄荷醇 (推荐防蛀需求的用户) | 20 条 / 盒 30 盒 / 箱 |

更多产品信息，请与我司联系



小杯装漱口水



瓶装漱口水



更多定制口味

逗邦牙线

强韧不易崩线 细滑不伤牙龈

高分子细滑 PE 线材，纤韧丝滑
人体工程学设计，使用更贴心

| 货号 | 产品名称 | 描述 | 套装规格 |
|---------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| KQYX-A001-50 | 逗邦深洁牙线棒（独立装） | 独立包装，方便卫生 | 50 支 / 盒 72 盒 / 箱 |
| KQYX-A002-50 | 逗邦双线速洁牙线棒 | 双线易清洁，省时省力 | 50 支 / 盒 200 盒 / 箱 |
| KQYX-A003-100 | 逗邦自动盒装牙线棒 | 一秒出线，卫生便捷 | 100 支 / 盒 108 盒 / 箱 |
| KQYX-A004-200 | 逗邦牙线替换装 | 专用替换装，整体添装，循环补充 | 200 支 / 盒 120 盒 / 箱 |
| KQYX-A005-10 | 逗邦便携牙线棒 | 小巧便携 易收纳 | 10 支 / 盒 10000 盒 / 箱 |



逗邦湿巾

一抹洁净，锁水润爽

棉柔无纺布：精选纯棉质感平纹无纺布，细腻柔韧不伤肤
超纯水配方：EDI 系统多重净化，享受水洗般的洁净体验
安全不刺激：通过皮肤刺激性检测，放心擦拭手脸部位
温和无添加：无有害添加，弱酸性温和配方，亲肤无负担

| 货号 | 产品名称 | 描述 | 套装规格 |
|--------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| SZJW-A001-80 | 逗邦 EDI 纯水湿巾（80 片） | 家庭大包装，EDI 纯化水、水刺无纺布 | 80 片 / 包 24 包 / 箱 |
| SZJW-A002-10 | 逗邦 EDI 纯水湿巾（10 片） | 独立包装，EDI 纯化水、水刺无纺布 | 10 片 / 包 100 包 / 箱 |
| SZJW-A003-80 | 逗邦卫生湿巾（80 片） | 家庭大包装，杀菌率达 99.9%，珍珠纹水刺无纺布 | 80 片 / 包 24 包 / 箱 |
| SZJW-A004-10 | 逗邦卫生湿巾（10 片） | 独立包装，杀菌率达 99.9%，珍珠纹水刺无纺布 | 10 片 / 包 100 包 / 箱 |







自由呼吸 美好生活

深圳逗点生物技术有限公司

地址：深圳市龙岗区吉华街道甘李六路 12 号中海信创新产业城 12 栋 1 楼

Tel: 400-878-7248 Web: www.biocomma.cn Email: info@biocomma.com



逗邦官方公众号



逗邦天猫旗舰店



逗邦京东官方旗舰店